


Geo LUXEN ENAMEL が有効なケースについて

弊社では、ケースに合わせたジルコニア材を選択し使用しますが、なかでもLUXEN ENAMEL(Geo)は強度が1100MPaときわめて強く、ロングスパンのブリッジ等に向いています。

もう一つの特徴は、スーパーハイトランス(ATDジャパン)と比較して透明度が低い点です。この特徴は、下記のようなケースで有効になります。


● 支台歯間が広い場合

口腔内の影が反映して、歯牙が暗くなりがちですが、LUXEN ENAMELだと影響を抑えられます。

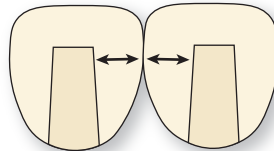

● 支台歯が変色している場合(またはクラウンが薄くなる場合)


LUXEN ENAMELですと、支台歯の色の透過を抑えます。
※透明度が必要な場合は、ジルコニア材にスーパーハイトランスを使用して製作し、オパーク効果のあるセメントを使用させていただきます。
または、内面にホワイトオパークを施す方法もありますが、その場合はクラウンの厚みは1.0mm以上必要です。

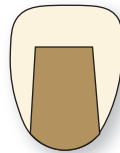

【オプション】

より審美性を高めるには

LUXEN ENAMELを使用したフルジルコニア冠はステイン法になりますが、切端、隅角をカットバックし、ポーセレンを築盛することで透明感を得られ、審美性が高まります。

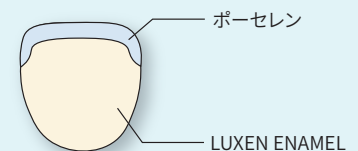


※使用ジルコニア材の選択につきましては、お気軽にご相談ください。

弊社製作のノンクラスプデンチャー 「フレキシブルデンチャー」の院内での維持力調整について

院内でできます!

弊社のノンクラスプデンチャーブランド「フレキシブルデンチャー」は床に熱可塑性材料を使用しており、部分床義歯の宿命ともいえる「緩み」が起きても下記の要領にて院内で調整ができますので、患者様にご不便をおかけいたしません。

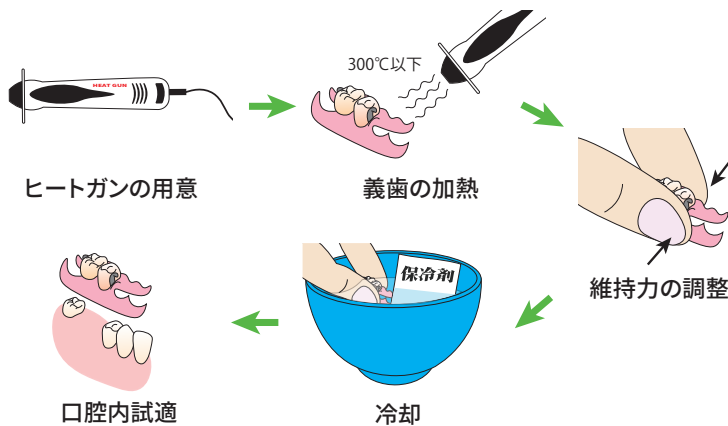

注意点を掲載した資料や動画をご用意しております。
下記よりアクセスのうえ、ご確認ください。
また、ご不明な点はお問合せください。

PDF資料



動画



※ご連絡いただければ練習用のフレキシブルデンチャーをお送りいたします。一度練習してから実施されることをお勧めいたします。

LINE スタンプをつくりました

よろしくね。

このたび、歯とシロクマをモチーフにしたキャラクター「モーラーベアー」のLINEスタンプを作成しました。第一弾、第二弾と合わせて32種のスタンプです。

LINEのスタンプショップにて販売しておりますので、スタッフ間でのコミュニケーションに是非ご使用ください。



有限会社



〒232-0008 神奈川県横浜市南区庚台32-6

TEL/FAX : 050-1340-4621 月~金(土日・祝休)

9:00~18:30

エムエスクリエイト



弊社WEBサイト

